

TSC LIFE

MISTRAL-AIR[®]

Heizgerät mit Gebläseluft

Entwickelt, um dem Temperaturabfall einen Schritt voraus zu sein – denn die ersten 30 Minuten sind entscheidend.¹⁻³

**VOLLSTÄNDIGER
PRODUKTFLEITFADEN**



tsc-life.com

MISTRAL-AIR® HEIZGERÄT MIT GEBLÄSELUFT

Verbesserung der Patientenwärmung durch erprobte innovative Technik

Das Temperaturmanagement ist eine Variable, die sich von Beginn der Behandlung an steuern lässt, wobei vor allem die ersten 30 Minuten entscheidend sind. Mistral-Air® ermöglicht es, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen – mit körpernahen Decken und Wärmeanzügen, die für unterschiedliche Verfahren, Lagerungen und Zugangserfordernisse konzipiert sind.

Mistral-Air® MA1400 erreicht seine Betriebstemperatur in weniger als 30 Sekunden¹⁻³ und trägt so dazu bei, Verzögerungen zu vermeiden, wenn es vor allem auf schnelle Erwärmung ankommt. Dank der voreingestellten Starttemperatur, der displaylosen Bedienoberfläche und des einfachen Drei-Tasten-Designs lassen sich die Einleitung und Aufrechterhaltung der Erwärmung mühelos steuern.

Mistral-Air® Decken wurden speziell für die kombinierte Verwendung mit dem Heizgerät entwickelt, um Patienten effizient gleichmäßige Wärme zuzuführen.

Minimiert Verzögerungen, wenn es auf frühzeitige Erwärmung ankommt^{1,2,3}

Erreicht 38 °C in weniger als 30 Sekunden

Sorgt dafür, dass sich das medizinische Team in kritischen Phasen weiter auf die Behandlung konzentrieren kann¹

Geräuscharmer Betrieb (48/53 dB)

Vereinfacht die Einleitung der Erwärmung und reduziert den Bedienaufwand¹

Standard-Starttemperatur von 38 °C und Bedienung über nur drei Tasten

Unterstützt die Infektionskontrolle und den Schutz der Patienten^{1,6}

Der HEPA-H13-Filter entfernt ≥ 99,95 % der Partikel aus der Luft

Einfachere Positionierung in OPs mit wenig Platz^{1,4,5}

Kompaktes und leichtes Design (4,4 kg)

Hält viermal länger als Systeme anderer Marken^{7,8}

Lebensdauer des HEPA-Filters: 2.000 Stunden

Mistral-Air® MA1400 Heizgerät mit Gebläseluft

EIN TASTENDRUCK ist genug, um schnell die korrekte Erwärmungstemperatur zu erreichen.

Artikel-Nr.	MA1400-230	MA1400-115
Spannung, Frequenz, Strom	220–240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A	100–125 V~, 50/60 Hz, 7 A
Durchschnittliche Leistung bei 43 °C	675 W	800 W
Abmessungen	250 mm x 250 mm x 380 mm (L x B x H)	9,84 x 9,84 x 14,96 Zoll (L x W x H)
Gewicht	4,4 kg	9,7 lbs
Geräte-Schalldruck	48 dB(A)	53 dB(A)
Schlauch/Schlauch in XL-Länge	1,8 m/3 m	5,91 Fuß/9,84 Fuß
Länge des Netzkabels	> 4,0 m	> 13,12 Fuß
Einstellbare Temperatur	Umgebungsluft, 32° C, 38° C und 43° C	Umgebungsluft, 89,6 °F, 100,4 °F und 109,4 °F
Filterung	Filter der HEPA H13-Klasse gemäß EN 1822-1:2019	Filter der HEPA H13-Klasse gemäß ISO 29463-5:2022
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Einstufung	MDR 2017/745/EU Klasse II 0344	FDA-Einstufung Klasse II
Einstufung nach IEC 60601-1	Klasse I, Typ BF (Body Floating)	Klasse I, Typ BF (Body Floating)
Einstufung nach IEC 60529	IP21	IP21




Innovation with purpose



Optionales Zubehör MA1400

MA1410	Mistral-Air® MA1400 Rollgestell	1 St./VE
MA1401	Mistral-Air® MA1400 HEPA-Filter	18 St./VE
MA1020	Mistral-Air® Schlauchklemme mit Drahtschlinge	10 St./VE
MA1018	Mistral-Air® Schlauch, 1,8 m	1 St./VE
MA1018-XL	Mistral-Air® Schlauch, 3 m	1 St./VE

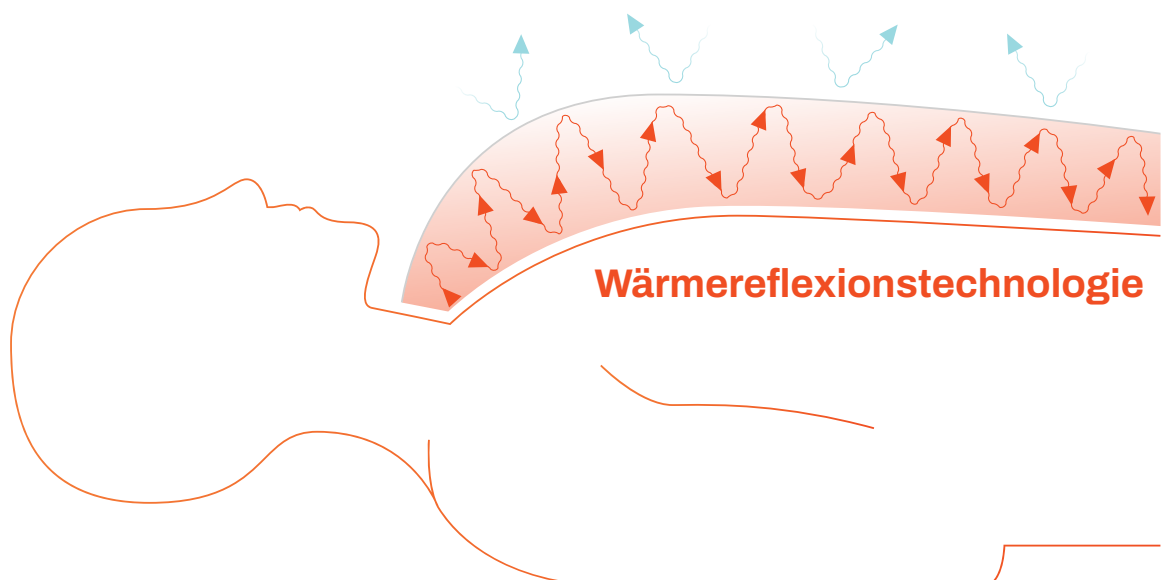

Mistral-Air® Wärmedecken und Wärmeanzüge

Die Mistral-Air® Wärmedecken und Wärmeanzüge ermöglichen das Zudecken von Patienten bei einer Vielzahl von Eingriffen und Körperpositionen. Die Diffusionstechnologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der warmen Luft über die Hautoberfläche, während Premium-Decken dank ihrer Reflexionstechnologie dazu beitragen, die Wärme zu speichern und übermäßigen Wärmeverlust während der Operation oder des Transports zu reduzieren.

Mistral-Air® Decke Plus und Wärmeanzüge

Mistral-Air® Decken Plus und Wärmeanzüge unterstützen die Erwärmung in komplexen chirurgischen Szenarien.

- Das breite Sortiment umfasst Standarddecken, Unterlegdecken, Spezialdecken und Wärmeanzüge.
- Für eine Vielzahl von Patientenpositionen und Anforderungen an den Zugang während des Eingriffs entwickelt.
- Verfahrensspezifische Ausführungen tragen dazu bei, dass der Zugang zum Operationsfeld erhalten bleibt.
- Die Ausführung der Decken unterstützt den effizienten Wärmetransfer bei der Erwärmung mit Gebläseluft.
- Optimale Wärmeübertragung auf den Patienten.
- Kein Abheben dank kontrollierter Luftdiffusion.

Mistral-Air® Premium-Decken und -Anzüge

Thermische Kontinuität und Wärmeretention

Mistral-Air® Premium-Decken und Premium-Wärmeanzüge unterstützen das Vorwärmen und gewährleisten thermische Kontinuität, wenn Temperaturstabilität von entscheidender Bedeutung ist.

- Bieten zwei Vorteile auf einmal: Erwärmung mit Gebläseluft und passive Isolierung.
- Ermöglichen eine effektivere Reduktion des Wärmeverlusts während des gesamten perioperativen Ablaufs, einschließlich des Transports.
- Die **Wärmereflexionstechnologie** trägt dazu bei, die Wärme beim Patienten zu halten, anstatt überschüssige Wärme an das Umfeld im OP abzugeben.
- Können zusätzliche Betttücher bei Anwendung in Verbindung mit dem Gerät zur Erwärmung mit Gebläseluft überflüssig machen.
- Weniger Umgehungslösungen und Unterbrechungen zum Erwärmen erforderlich.
- Zur Unterstützung einer konsistenteren Wärmeretention und Reduzierung der Notwendigkeit einer reaktiven Erwärmung im weiteren Verlauf der Behandlung.
- Können den Verbrauch von Baumwoll-Betttüchern um mindestens 50 % senken.⁹




Mistral-Air® Wärmendecken

Decken für Erwachsene

Premium: 2 Lufteinlässe/Plus:
1 Lufteinlass

Integrierte Laschen zum Einwickeln
zur optimalen Fixierung der Decke

U-förmiger Halsausschnitt für
optimalen Patientenkomfort

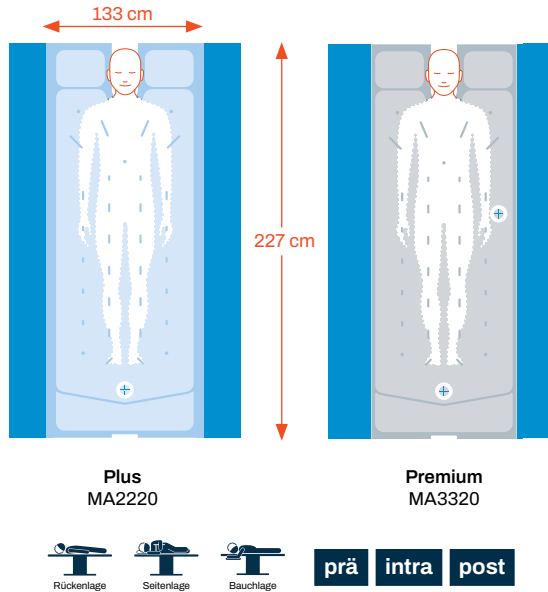

Ideal für Verfahren im Kopf- und Halsbereich:

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
(MKG-Chirurgie)

HNO-Chirurgie

Neurochirurgie

Schilddrüse

Karotiseingriffe


Aufwachraum (Post-Anesthesia
Care Unit, PACU) und Inten-
sivstation (Intensive Care Unit, ICU)

Decken für Kinder (> 1 Jahr)

1 Lufteinlass

Integrierte Laschen zum Einwickeln
zur optimalen Fixierung der Decke

U-förmiger Halsausschnitt für
optimalen Patientenkomfort

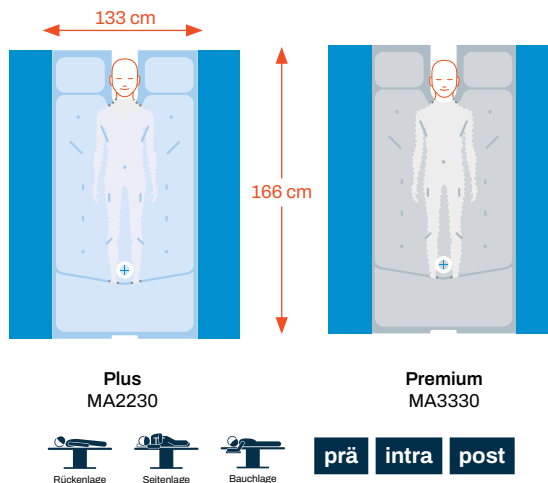

Ideal für Verfahren im Kopf- und Halsbereich:

Gaumenspaltenkorrektur

Gesichts-/Ohrchirurgie

Päd. Neurochirurgie


PACU und ICU

Decken für Neugeborene/ S Säuglinge (< 1 Jahr)

2 Lufteinlässe

Abnehmbarer Gesichtsschutz

Spezielle multifunktionale
Positionierung: verwendbar als
Unterlegdecke und zum Zudecken
des pädiatrischen Patienten

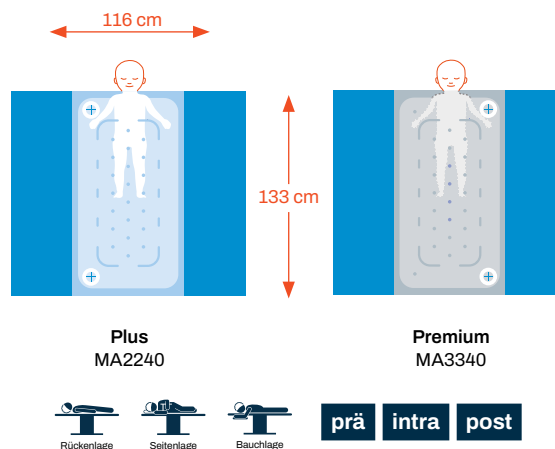

**Ideal für chirurgische Eingriffe bei
Neugeborenen/ Säuglingen:**

Angeborene Fehlbildungen

Hernien

Herzchirurgie

Fistel


PACU und ICU

Unterkörperdecken

Integrierte Laschen zum Einwickeln zur optimalen Fixierung der Decke

Klebeband

1 Lufteinlass

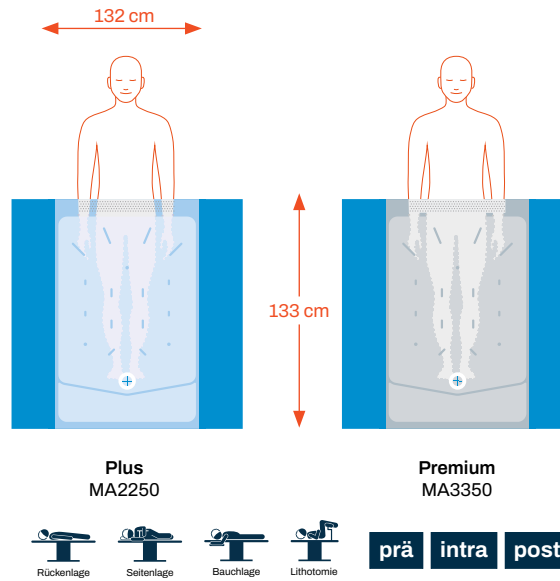

Ideal für Verfahren am Oberkörper/an den oberen Gliedmaßen:

Orthopädie (Schulter, Arme, Schlüsselbein)

Neurochirurgie

Plastische Chirurgie (Brust und Gesicht)

Allgemeinchirurgie

Thoraxchirurgie (VATS, MICABG)

Gefäßchirurgie

Oberkörperdecken

U-förmiger Halsausschnitt


2 Lufteinlässe

Klebeband

Nicht abnehmbarer Gesichtsschutz

2 x 2 integrierte Bindebänder

Zum präoperativen Vorwärmen die Decke einfach um 90 Grad drehen!

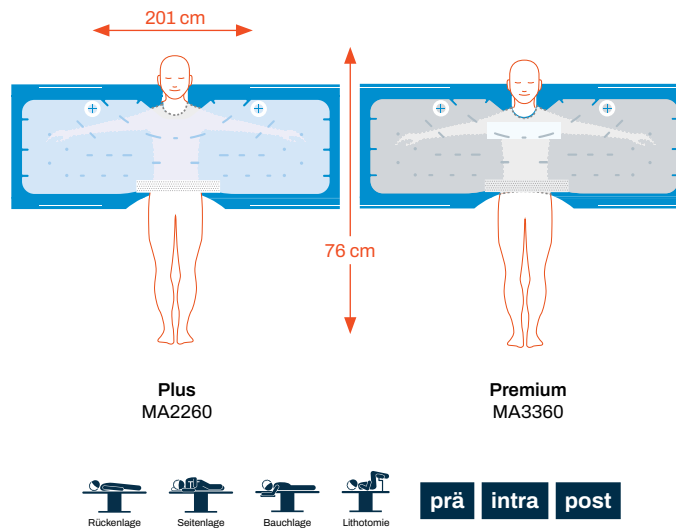

Ideal für Verfahren am Unterkörper/an den unteren Gliedmaßen:

Orthopädie (untere Gliedmaßen, ORIF, DHSIMHS)

Allgemeinchirurgie (Hernie, Appendektomie, Laparoskopie)

Gynäkologie

Urologie (TURP, TURBT, PCNL, Zystektomie)

Mistral-Air® Wärmendecken

Halbe Oberkörperdecke

U-förmiger Halsausschnitt


2 Lufteinlässe

Klebeband

Nicht abnehmbarer Gesichtsschutz (nur Premium)

2 x 1 integrierte Bindebänder

Zum präoperativen Vorwärmen die Decke einfach um 90 Grad drehen!

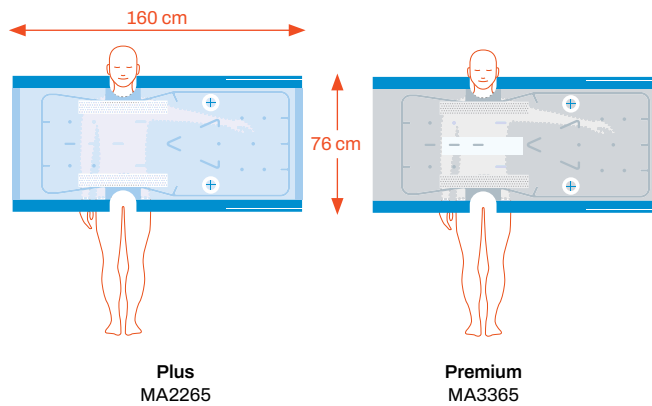

prä intra post

Ideal für Verfahren am Unterkörper/an den unteren Gliedmaßen (ein Arm ausgebreitet):

Orthopädie (untere Gliedmaßen, ORIF, DHSIMHS)

Allgemeinchirurgie (Hernie, Appendektomie, Laparoskopie)

Gynäkologie

Urologie (TURP, TURBT, PCNL, Zystektomie)


Torso-Decke

U-förmiger Halsausschnitt

2 Lufteinlässe

1 Klebeband

Nicht abnehmbarer Gesichtsschutz

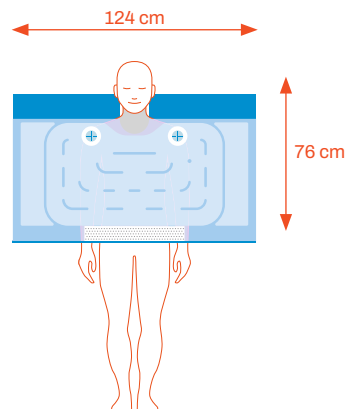

intra

Ideal für Verfahren am Unterkörper/an den unteren Gliedmaßen (Arme am Körper):

Orthopädie (untere Gliedmaßen, ORIF, DHSIMHS)

Allgemeinchirurgie (Hernie, Appendektomie, Laparoskopie)

Gynäkologie

Urologie (TURP, TURBT, PCNL, Zystektomie)

Mistral-Air® Unterlegdecken


Volle Unterlegdecken

4 Lufteinlässe

2 Klebebänder (1 auf jeder Seite)

Abnehmbarer Gesichtsschutz (nur Premium)

Extralange perforierte Armschlitz

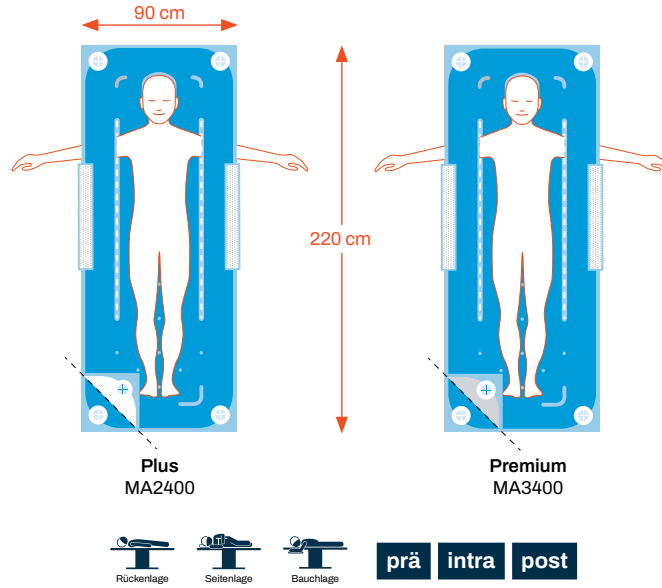

**Unsere flexibelste Decke.
Ideal für:**

Orthopädie

Herzchirurgie: CABG,
Klappenprothesen, CBP

Liposuktion

Allgemeinchirurgie: Offen und
laparoskopisch

Roboterassistierte Chirurgie

Thoraxchirurgie


Halbe Unterlegdecken

2 Lufteinlässe

2 Klebebänder
(1 auf jeder Seite)

Abnehmbarer Gesichtsschutz
(nur Premium)

Perforierte Armschlitz

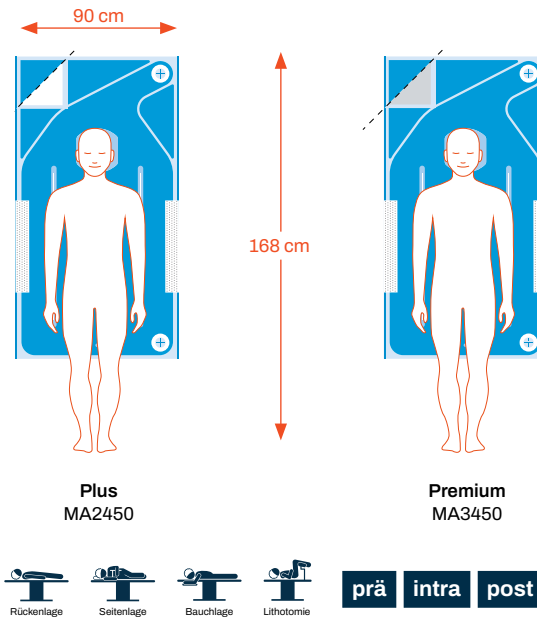

**Ideal für Verfahren am
Unterkörper und für Verfahren,
bei denen vollständiger Zugang
erforderlich ist:**

Orthopädie (Becken-ORIF)

Gynäkologie (Hysterektomien,
Vulvaresektion, Laparoskopien)

Urologie (TURP, TURBT,
PCNL, radikale Prostatektomie,
Zystektomie)

Roboterassistierte Chirurgie


Mistral-Air® Unterlegdecken

Unterlegdecke für Kinder (> 1 Jahr)

2 Lufteinlässe

Abnehmbarer Gesichtsschutz

Multifunktionale Positionierung: kann gedreht werden, sodass sich die Lufteinlässe auf einer Seite befinden

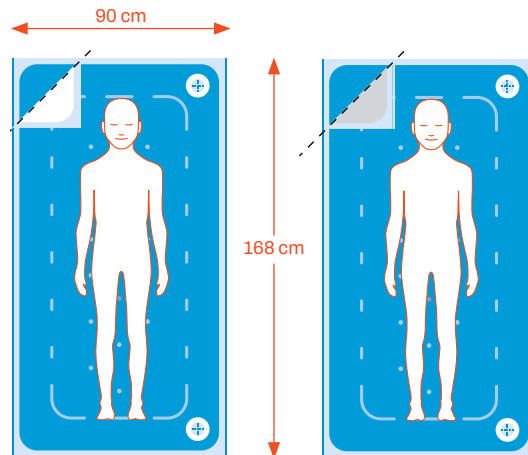

Plus
MA2475

Premium
MA3475



prä intra post

Ideal für vollständigen Zugang zu pädiatrischen Patienten:

Orthopädie (Arthroskopie der unteren Gliedmaßen, Femurosteotomie)

Herzchirurgie (offener Brustkorb, CBP)


Allgemeinchirurgie (Hernie, Appendektomie, Laparoskopie, roboterassistiert)

Decken für Neugeborene (< 1 Jahr)

2 Lufteinlässe

Abnehmbarer Gesichtsschutz

Spezielle multifunktionale Positionierung: verwendbar als Unterlegdecke und zum Zudecken des pädiatrischen Patienten

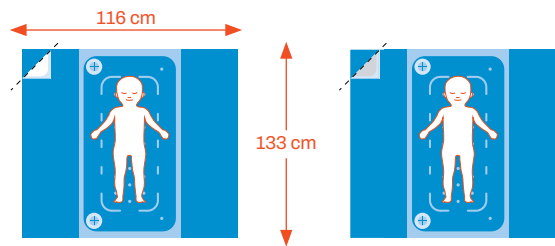

Plus
MA2240

Premium
MA3340



prä intra post

Ideal für chirurgische Eingriffe bei Neugeborenen/Säuglingen:

Angeborene Fehlbildungen

Hernien

Herzchirurgie

Fistel

Aufwachraum


Lithotomie-Unterlegdecken

2 Lufteinlässe

Perforierte Armschlitz

Je ein Bindeband pro Seite zum Befestigen der Decke am Bein

Spezielle Beinabdeckung zur Reduzierung des Wärmeverlusts am Oberschenkel

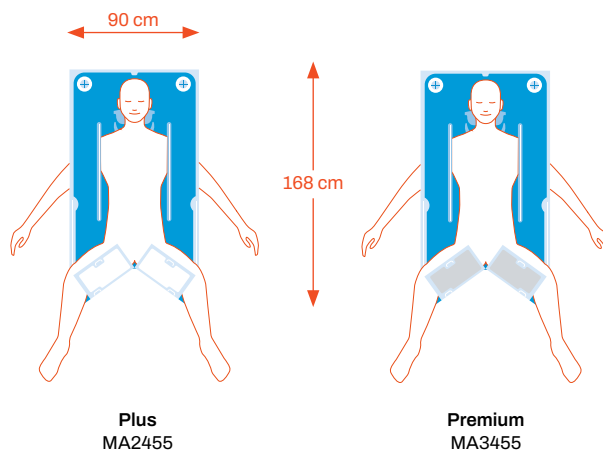

Plus
MA2455

Premium
MA3455



Ideal für gynäkologische und urologische Verfahren:

Orthopädie (Becken-ORIF)

Gynäkologie (vaginale Hysterektomie, Vulvaresektion, Vaginoplastik, Prolaps, Hysteroskopie)


Roboterassistierte Chirurgie

Urologie (TURP, TURBT, PCNL, radikale Prostatektomie, Zystektomie)

Schlauch

1 Lufteinlass

In verschiedenen Settings verwendbar

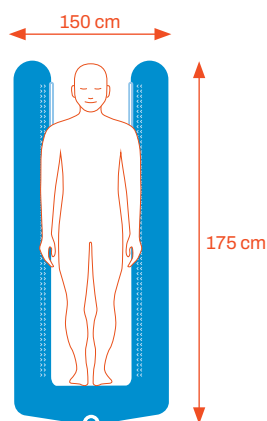

MA0510



Wenn keine vollständige Abdeckung des Körpers möglich ist, ist unser Schlauch ideal für uneingeschränkten Zugang:

Katheterlabor

Verfahren, bei denen die Verwendung einer Decke schwierig ist.

Ideal in Kombination mit einer reflektierenden Thermoflect® Passivdecke

Mistral-Air® Spezialdecken

Decke für chirurgischen Zugang (steril und unsteril)

2 Lufteinlass

Integrierte Laschen zum Einwickeln zur optimalen Fixierung der Decke


4 Klebebänder zum Fixieren des chirurgischen Zugangs Fensters am Patienten

Chirurgisches Zugangs Fenster (53 x 41 cm)

Nicht abnehmbarer Gesichtsschutz

Einfache Positionierung im sterilen Bereich

Einfache Vergrößerung des Operationsfeldes durch den Chirurgen auf bis zu 70 cm

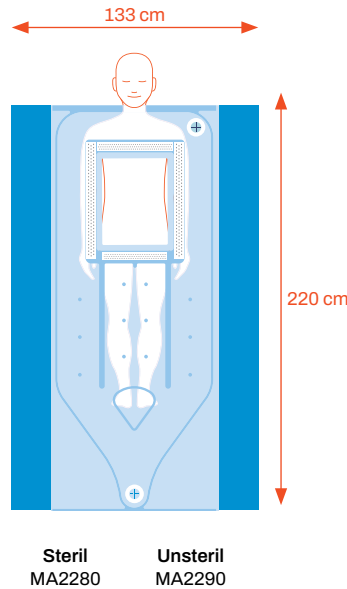

Ideal für kritische Verfahren am Oberkörper:

Orthopädie (Wirbelsäule)

Transplantationen (Niere, Leber, Darm)

Leberresektionen

Thorakal (Lobektomie, Bullektomie, Pneumonektomie)

Gynäkologie (abdominale Hysterektomie)

Urologie (Nephrektomie, radikale Prostatektomie)

Roboterassistierte Chirurgie

Unterkörperdecke für chirurgischen Zugang (steril)


1 Lufteinlass

4 Klebebänder zum Fixieren des chirurgischen Zugangs Fensters am Patienten

Integrierte Laschen zum Einwickeln zur optimalen Fixierung der Decke

Chirurgisches Zugangs Fenster (40 x 16 cm)

Einfache Positionierung im sterilen Bereich
Das transparente Leisten-/Femur-Zugangsfenster ermöglicht einen einfachen Zugang zur Femoralarterie

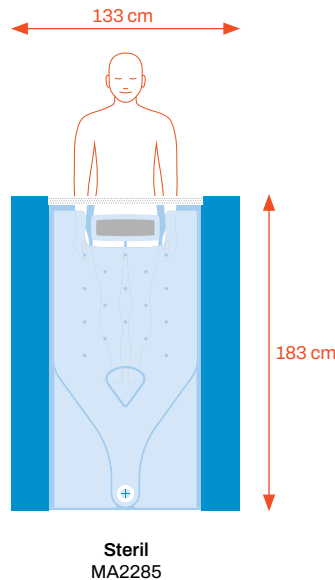

Ideal für kritische Verfahren am Oberkörper:

Herzchirurgie (CABG, Mitralklappenersatz, TAAA CPB-Verfahren, thorakale Aortenchirurgie, pulmonale Thromboemboliektomie)

Herz-Operationsdecke (steril)


1 Lufteinlass (sterile Schlauchverlängerung)

4 Klebebänder zum Fixieren des chirurgischen Zugangsfensters am Patienten

Klebeband zum Fixieren des chirurgischen Zugangsfensters am Patienten

Chirurgisches Zugangsfenster (40 x 16 cm)

Einfache Positionierung im sterilen Bereich
Der 91 cm (3 Fuß) lange vormontierte Schlauch ermöglicht die Platzierung des Wärmegeräts außerhalb des sterilen Bereichs

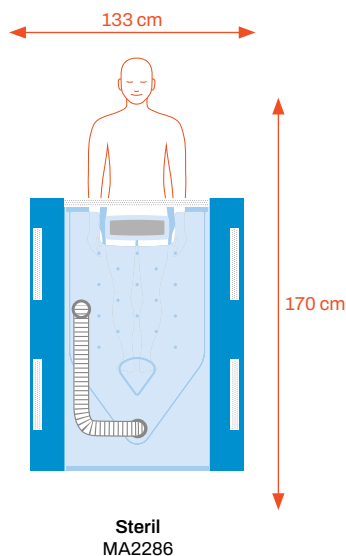

Entwickelt für die Herzchirurgie:

Herzchirurgie (CABG, Mitrал-/Aortenklappenersatz, TAAA CPB-Verfahren, thorakale Aorten Chirurgie, pulmonale Thromboemboliektomie)


Mistral-Air® Wärmeanzüge: 3-in-1-Lösung

Der Mistral-Air® Wärmeanzug ist ideal für die Anwendung bei Operationen mit hohem Hypothermierisiko, wie etwa bei Organtransplantationen, Leberoperationen und roboterassistierten Operationen.

Der Anzug sorgt dafür, dass der gesamte Körper des Patienten vor, während und nach einer Operation warm gehalten wird und nicht auskühlt

3-in-1:

1. Patienten Kittel
2. Wärmedecke für Ober- oder Unterkörper
3. Zusätzliche Baumwolldecken

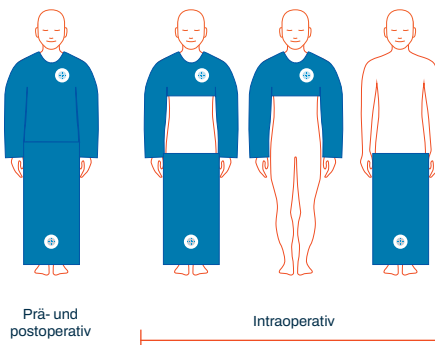

Zusätzliche Merkmale:

Verstellbarer Klettverschluss ermöglicht das einfache Öffnen und Wiederverschließen des Anzugs, zum Beispiel für EKG-Kabel

Vollständiger Zugang zum Rücken für Verfahren wie zum Beispiel eine Lumbalpunktion

Leicht abnehmbare Ärmel, zum Beispiel für Infusionsleitungen und Blutdruckmessung

Weiches Vliesmaterial, kombiniert mit effizient isolierendem reflektierendem Thermoflect®-Material

Auch als Premium-Modell erhältlich (reflektierend)

Produktliste und -details

	REF	Größe (mm)	Wärme­fläche (mm)	Gewicht (g)	Luft­einlass/ -einlässe	Gesichts- schutz	Klebeband In der Breite	In der Länge
Mistral-Air® Wärmendecken								
Decke Plus für Erwachsene	MA2220	2270 x 1330	1730 x 790	180	1			
Decke Plus für pädiatrische Patienten	MA2230	1660 x 1330	790 x 1010	131	1			
Decke Plus für Neugeborene	MA2240	1160 x 1330	1080 x 570	126	2	Abnehmbar		
Unterkörperdecke Plus	MA2250	1320 x 1330	945 x 790	115	1		1	
Oberkörperdecke Plus	MA2260	2010 x 760	1880 x 580	110	2	befestigt	1	
Halbe Oberkörperdecke Plus	MA2265	1600 x 760	1375 x 580	98	2	befestigt	1 je Seite	
Torsodecke Plus	MA2270	1240 x 760	900 x 530	78	2	befestigt	1	
Premium für Erwachsene	MA3320	2270 x 1330	1730 x 790	198	2			
Premium für Kinder	MA3330	1660 x 1330	790 x 1010	144	1			
Premium für Neugeborene	MA3340	1160 x 1330	1080 x 570	132	2	Abnehmbar		
Premium für Unterkörper	MA3350	1320 x 1330	945 x 790	124	1		1	
Premium für Oberkörper	MA3360	2010 x 760	1880 x 580	120	2	befestigt	1	
Premium für halben Oberkörper	MA3365	1600 x 760	1375 x 580	109	2	befestigt	1 je Seite	
Mistral-Air® Unterlegdecken								
Ganzkörper-Unterlegdecke Plus	MA2400	2200 x 900	2160 x 840	184	4			1
Halbe Unterlegdecke Plus	MA2450	1680 x 900	1020 x 840	141	2			1
Lithotomie Plus	MA2455	1675 x 900	1200 x 840	129	2			
Unterlegdecke Plus für pädiatrische Patienten	MA2475	1680 x 900	1630 x 840	133	2	Abnehmbar		
Decke Plus für Neugeborene	MA2240	1160 x 1330	1080 x 570	126	2	Abnehmbar		
Premium Ganzkörper-Unterlegdecke	MA3400	2200 x 900	2160 x 840	219	4	Abnehmbar		1
Premium Halbe Unterlegdecke	MA3450	1680 x 900	1020 x 840	168	2	Abnehmbar		1
Premium Lithotomie	MA3455	1675 x 900	1200 x 840	140	2			
Premium Unterlegdecke für Kinder	MA3475	1680 x 900	1630 x 840	163	2	Abnehmbar		
Premium für Neugeborene	MA3340	1160 x 1330	1080 x 570	132	2	Abnehmbar		
Mistral-Air® Spezialdecken								
Unterkörper-Operationsdecke Plus, steril	MA2285	1830 x 1330	890 x 840	174	1		1	1
Operationsdecke Plus, steril	MA2280	2200 x 1330	1297 x 840	203	2	Nicht abnehmbar	4 im chirurgi- schen Zugangs- fenster	
Operationsdecke Plus	MA2290	2200 x 1330	1297 x 840	194	2	Nicht abnehmbar	4 im chirurgi- schen Zugangs- fenster	
Herz-Operationsdecke Plus, steril	MA2286	1700 x 1330	745 x 840	410	1		1	
Schlauch	MA0510	1750 x 150	170 x 150	65	1			

	Decken je VE (St.)		REF	Patienten- größe (cm)	Lufteinlass/ -einlässe	
Mistral-Air® Wärmeanzüge (10 St.)						
	40 St.	Mistral-Air® Wärmeanzug, S	MA1710	≤ 165	2, davon 1 im oberen und 1 im unteren Teil	
	40 St.	Mistral-Air® Wärmeanzug, M/L	MA1720	165–195		
	40 St.	Mistral-Air® Wärmeanzug, XL	MA1740	≥ 195		
	40 St.	Mistral-Air® Premium Wärmeanzug, M	MA1620	165–180		
	40 St.	Mistral-Air® Premium Wärmeanzug, L	MA1630	180-195		
Mistral-Air® MA1400 Wärmegeräte und Zubehör						
	40 St.	Mistral-Air® MA1400 Heizgerät mit Gebläseluft (220–240 V)	MA1400-230			
	40 St.	Mistral-Air® MA1400 Heizgerät mit Gebläseluft (110–120 V)	MA1400-115			
	40 St.	Mistral-Air® MA1400 Rollgestell	MA1410			
	40 St.	Mistral-Air® MA1400 HEPA-Filter	MA1401			
	40 St.	Mistral-Air® Schlauchklemme mit Drahtschlinge	MA1020			
	40 St.	Mistral-Air® Schlauchklemme	MA5001			
	40 St.	Mistral-Air® Schlauch 1,8 m	MA1018			
	40 St.	Mistral-Air® Schlauch XL (3 m)	MA1018-XL			
			Bestellnummer	Bestellnummer mit Schnellkupplung		
Mistral-Air® MA1200 Wärmegeräte und Zubehör						
	40 St.	Mistral-Air® 1200 Heizgerät mit Gebläseluft (220–240 V)	MA1200-EU	MA1200-QC-EU		
	40 St.	Mistral-Air® 1200 Heizgerät mit Gebläseluft (110–120 V)	MA1200-US	MA1200-QC-US		
	40 St.	Mistral-Air® MA1200 Verstellbarer Ständer mit Korb	MA5250			
	40 St.	Mistral-Air® MA1200 Montage-Set	MA5002			
	40 St.	Mistral-Air® Schlauchklemme	MA5001			
	40 St.	Mistral-Air® Verstellbarer Ständer mit Korb	MA5250			
	40 St.	Mistral-Air® MA1200 – Filter (TSCI0017)	MA1200-1001			
		Mistral-Air® Schlauch (1,8 m)	MA1018	MA1018-QC		
		Mistral-Air® Schlauch XL (3 m)	MA1018-XL	MA1018XL-QC		
	20 St.					
	20 St.					
	20 St.					
	10 St.					
	100 St.					





QR-Code scannen für
weitere Informationen

Innovation with purpose

TSC LIFE

Innovation with purpose

Literatur

1. TSC Life. Mistral-Air® MA1400-230/MA1400-115 Benutzerhandbuch: Heizgerät mit Gebläseluft. 2026.
2. Sharma M et al. BJA 2015;115(Issue eLetters Suppl). doi:10.1093/bja/el_12925.
3. Sessler DI, Todd MM (Editor). Anesthesiology 2000;92(2):578-96. doi:10.1097/00000542-200002000-00042.
4. 3M Health Care. Bair Hugger Temperature Management Unit Model 775. 2013.
5. Cincinnati Sub-Zero Products, LLC. WarmAir Operation and Technical Manual: Model 135 Warming Unit. 2018.
6. European Committee for Standardization. EN 1822-1:2019. Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) – Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, Kennzeichnung. Brüssel:
7. Internes Dokument: DMT-Prüfbericht Nr. APS 2 00 056 17.1, von DMT GmbH & Co. KG, Deutschland. 2000 Stunden Filter-Service-Alarm
8. Bair Hugger Service Manual, Bair Hugger Model 775 Warming Unit. 19th ed. Eden Prairie, MN: 3M Health Care; p. 19. & Cincinnati Sub Zero Warmair Model 135 Manual. 4th ed. Cincinnati, OH: Cincinnati Sub Zero Products, Inc.; S. 17.
9. Bergroth L. Quality Initiative Collaborative Leads to Reduction in Linen Usage and Overall Cost Savings.

Die Verwendung unserer medizinischen Geräte ist ausschließlich für Angehörige der Gesundheitsberufe vorgesehen. Angehörige der Gesundheitsberufe sind angehalten, bei der Beurteilung der Eignung eines bestimmten Produkts für die Behandlung eines individuellen Patienten ihr eigenes professionelles klinisches Urteilsvermögen einzusetzen. TSC Life erteilt keine medizinischen Ratschläge und rät Angehörigen der Gesundheitsberufe dringend, sich vor der Verwendung eines bestimmten Produkts im Umgang damit schulen zu lassen. Angehörige der Gesundheitsberufe sollten vor der Verwendung eines von TSC Life gelieferten Produkts stets die Packungsbeilage, die Produktkennzeichnung und/oder die Gebrauchsanleitung, einschließlich der Richtlinien zur Reinigung und Sterilisation (sofern zutreffend), lesen. Die hier präsentierten Informationen zielen darauf ab, bestimmte Produkte und das umfangreiche Angebot von TSC Life vorzustellen. Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften und/oder medizinischer Verfahren kann die Produktverfügbarkeit in den einzelnen Märkten unterschiedlich sein. Bei Fragen zur Verfügbarkeit bestimmter TSC Life-Produkte in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Mitarbeiter von TSC Life.

TSC Life

Hergestellt von: The Surgical Company International B.V. | Bedrijvenpark Twente Noord 48 | 7602 KR Almelo | Niederlande
T: +31 20 790 2100 | letsconnect@tsc-life.com | www.tsc-life.com