TSC LIFE

MISTRAL-AIR®

Système de réchauffement à air pulsé

Conçu pour anticiper la baisse de température – car ce sont les 30 premières minutes qui comptent le plus.[1-3]

GUIDE COMPLET DU PRODUIT



tsc-life.com

SYSTÈME DE RÉCHAUFFEMENT À AIR PULSÉ MISTRAL-AIR®

Améliorer le réchauffement des patients grâce à une innovation éprouvée

La gestion de la température est une variable contrôlable dès le début des soins, les 30 premières minutes s'avérant particulièrement critiques. Mistral-Air® aide les équipes à intervenir rapidement grâce à des couvertures ajustées et des combinaisons chauffantes conçues pour s'adapter à différentes procédures, positions et besoins d'accès.

Mistral-Air® MA1400 atteint sa température de fonctionnement en moins de 30 secondes[1-3], ce qui permet de réduire les délais lorsqu'un réchauffement rapide est primordial. Sa température de démarrage par défaut, son interface sans écran et sa conception simple à trois boutons permettent de lancer et de maintenir facilement le réchauffement.

Les couvertures Mistral-Air® sont spécialement conçues pour être parfaitement compatibles avec l'unité de réchauffement, offrant ainsi une chaleur constante et efficace au patient.

Minimise les retards lorsqu'un réchauffement rapide est essentiel[1,2,3]

Atteint 38 °C en moins de 30 secondes

Permet à votre équipe de rester concentrée pendant les phases de soins critiques[1]

Fonctionnement silencieux (48/53 dB)

Simplifie le démarrage du réchauffement et réduit la charge de travail[1]

Température de démarrage par défaut de 38 °C et commande à trois boutons seulement

Contribue à la prévention des infections et à la protection des patients[1,6]

Le filtre HEPA H13 élimine ≥ 99,95 % des particules en suspension dans l'air

Plus facile à positionner dans les blocs opératoires encombrés et très animés[1,4,5]

Conception compacte et légère (4,4 kg / 9,7 lbs)

Dure quatre fois plus longtemps que les systèmes concurrents[7,8]

Durée de vie du filtre HEPA : 2 000 heures

Unité de réchauffement à air pulsé Mistral-Air® MA1400

UN SEUL BOUTON suffit à fournir rapidement la température de réchauffement.

N° d'article	MA1400-230	MA1400-115
Tension, fréquence, courant	220-240 V~, 50/60 Hz, 3,5 A	100-125 V~, 50/60 Hz, 7 A
Puissance moyenne à 43 °C	675 W	800 W
Dimensions	250 x 250 x 380 mm (L x P x H)	9,84 x 9,84 x 14,96 pouces (L x P x H)
Poids	4,4 kg	9,7 lbs
Pression acoustique de l'appareil	48 dB(A)	53 dB(A)
Longueur du tuyau / tuyau XL	1,8 m / 3 m	5,91 pieds / 9,84 pieds
Longueur du câble d'alimentation	> 4,0 m	> 13,12 pieds
Réglage de la température	Air ambiant, 32 °C, 38 °C, 43 °C	Air ambiant, 89,6 °F, 100,4 °F, 109,4 °F
Filtration	Filtre de classe HEPA H13, conforme à EN 1822-1:2019	Filtre de classe HEPA H13, conforme à ISO 29463-5:2022
Garantie limitée	2 ans	2 ans
Classification	MDR 2017/745/UE Classe II 0344	Classification FDA Classe II
Classification CEI 60601-1	Classe I, corps flottant (CF)	Classe I, corps flottant (CF)
Classification CEI 60529	IP21	IP21






Accessoires en option MA1400

MA1410	Empattement Mistral-Air® MA1400	Boîte de 1
MA1401	Filtre HEPA Mistral-Air® MA1400	Boîte de 18
MA1020	Clamp pour tuyau avec fil Mistral-air®	Boîte de 10
MA1018	Tuyau 1,8 m Mistral-Air®	Boîte de 1
MA1018-XL	Tuyau 3 m Mistral-Air®	Boîte de 1



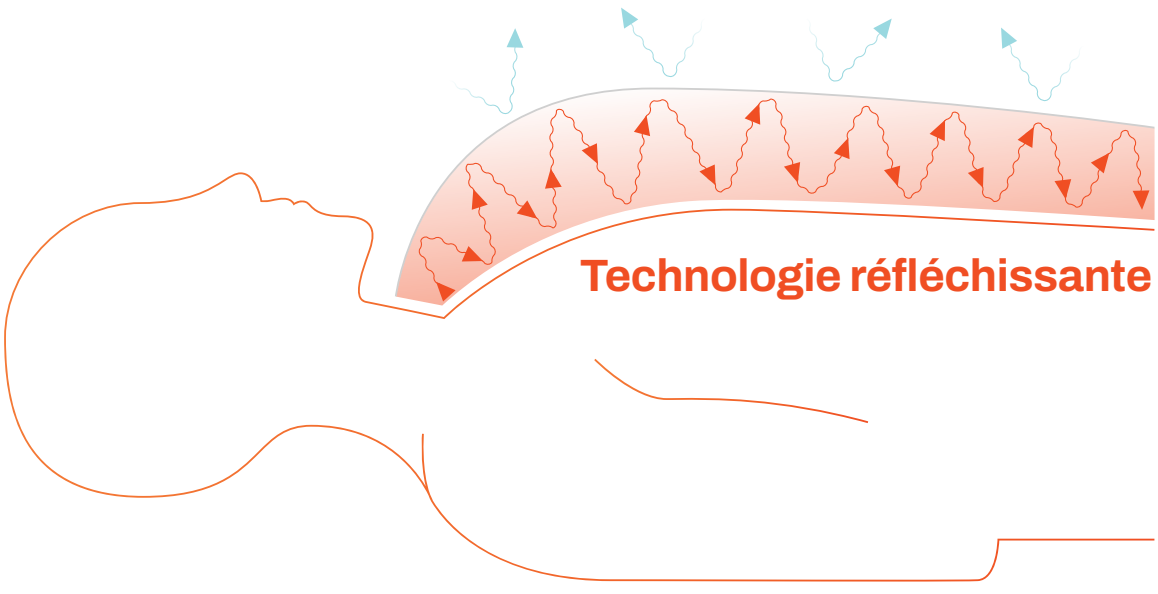

Gamme de couvertures et combinaisons chauffantes Mistral-Air®

Les couvertures et combinaisons chauffantes Mistral-Air® permettent de couvrir les patients dans le cadre d'un large éventail d'interventions et de positions. La technologie de diffusion permet de répartir l'air chaud sur toute la surface de la peau, tandis que les couvertures Premium utilisent une technologie réfléchissante pour aider à conserver la chaleur et réduire les pertes de chaleur excessives pendant une intervention chirurgicale ou un transport.

Couvertures et combinaisons chauffantes Plus Mistral-Air®

Les couvertures et combinaisons chauffantes Plus Mistral-Air® maintiennent le réchauffement pendant les interventions chirurgicales complexes.

- Notre large gamme comprend des couvertures standard, des matelas, des couvertures spécialisées et des combinaisons chauffantes.
- Conçues pour s'adapter à un large éventail de positions du patient et de besoins en matière d'accès pour les interventions.
- Les conceptions spécifiques à chaque intervention permettent de préserver l'accès au champ opératoire.
- Les conceptions des couvertures assurent un transfert efficace de la chaleur pendant le réchauffement à air pulsé.
- Transfert thermique optimal vers le patient.
- Pas de flottement, grâce à la diffusion contrôlée de l'air.

Couvertures et combinaisons Premium Mistral-Air®

Continuité thermique et rétention de la chaleur

Les couvertures et combinaisons chauffantes Premium Mistral-Air® assurent le pré-réchauffement et la continuité thermique dans les cas où la stabilité thermique est essentielle.

- Associe un réchauffement à air pulsé actif et une isolation passive.
- Contribue à réduire les pertes thermiques tout au long du parcours péri-opératoire, y compris pendant le transport.
- La **technologie réfléchissante** permet de conserver la chaleur autour du patient au lieu de dissiper l'excès de chaleur dans l'environnement opératoire.
- Peut permettre de réduire l'utilisation de draps supplémentaires avec l'unité de chauffage à air pulsé.
- Contribue à minimiser le nombre de solutions et les interruptions du réchauffement.
- Permet une rétention de la chaleur plus constante, ce qui évite d'avoir à recourir à un réchauffement d'urgence ultérieurement.
- Permet de réduire la consommation de draps en coton d'au moins 50 %.[9]








Couvertures chauffantes Mistral-Air®

Adulte

2 x entrée d'air Premium / 1 x entrée d'air Plus

Rabats intégrés pour une fixation optimale de la couverture

Espace cervical en forme de U pour un confort optimal du patient

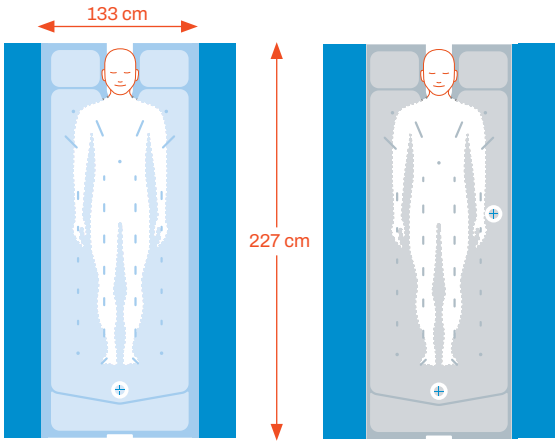

Plus
MA2220

Premium
MA3320

Décubitus dorsal | Latéral | Décubitus ventral

pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le cou et la tête :

Maxillo-faciale

Oreille, nez et gorge (ORL)

Neurochirurgie

Thyroïde

Carotide


Service de soins post-anesthésie et service de soins intensifs

Pédiatrique (>1 an)

1 x entrée d'air

Rabats intégrés pour une fixation optimale de la couverture

Espace cervical en forme de U pour un confort optimal du patient

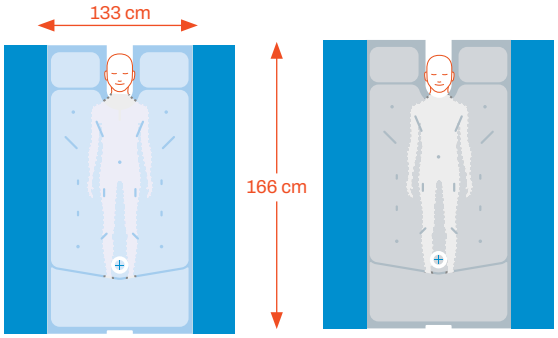

Plus
MA2230

Premium
MA3330

Décubitus dorsal | Latéral | Décubitus ventral

pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le cou et la tête :

Réparation de la fente labio-palatine

Chirurgie faciale/auriculaire

Neurochirurgie Péd.


Service de soins post-anesthésie et service de soins intensifs

Néonatal (<1 an)

2 x entrée d'air

Écran facial amovible

Positionnement multifonction unique : peut être utilisée comme matelas et comme couverture pour couvrir les patients pédiatriques

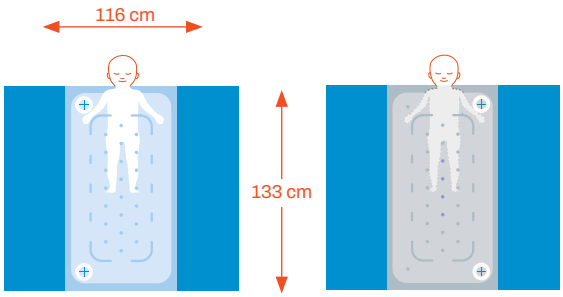

Plus
MA2240

Premium
MA3340

Décubitus dorsal | Latéral | Décubitus ventral

pré **péri** **post**

Idéale pour la chirurgie néonatale :

Anomalies congénitales

Hernie

Cardiaque

Fistule


Service de soins post-anesthésie et service de soins intensifs

Bas du corps

Rabats intégrés pour une fixation optimale de la couverture

Ruban adhésif

1 x entrée d'air

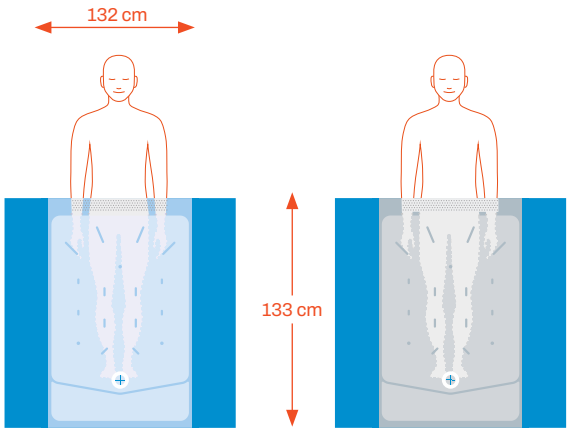

Plus
MA2250

Premium
MA3350



pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le haut du corps et les membres supérieurs :

Orthopédie (épaule, bras, clavicule)

Neurochirurgie

Plastique (poitrine et visage)

Chirurgie générale

Thoracique (VATS, PACMI)

Chirurgie vasculaire

Haut du corps

Espace cervical en forme de U


2 x entrée d'air

Ruban adhésif

Écran facial fixe

2 x 2 sangle intégrée

Tournez la couverture de 90 degrés durant la phase pré-opératoire pour le pré-réchauffement !

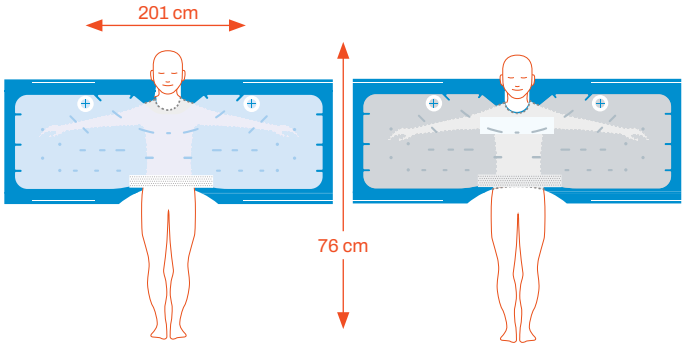

Plus
MA2260

Premium
MA3360



pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le bas du corps et les membres inférieurs :

Orthopédie (membres inférieurs, ROFI, DHS, IMHS)

Chirurgie générale (hernie, appendicectomie, laparoscopique)

Gynécologie

Urologie (RTUP, RTUTV, PCNL, cystectomie)

Couvertures chauffantes Mistral-Air®

Demi haut du corps

Espace cervical en forme de U


2 x entrée d'air

Ruban adhésif

Écran facial fixe
(Premium uniquement)

2 x 1 sangle intégrée

Tournez la couverture de 90 degrés durant la phase pré-opératoire pour le pré-réchauffement !

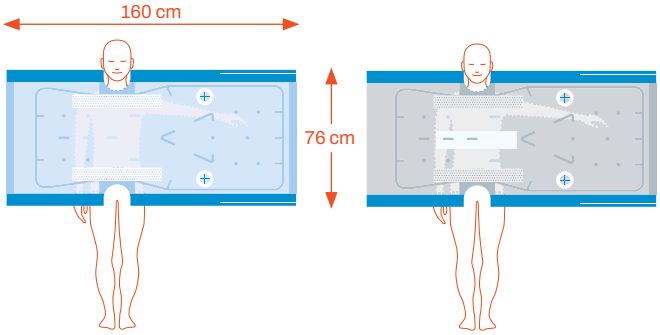

Plus
MA2265

Premium
MA3365



pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le bas du corps et les membres inférieurs (demi-croix) :

Orthopédie (membres inférieurs, ROFI, DHS, IMHS)

Chirurgie générale (hernie, appendicectomie, laparoscopique)

Gynécologie

Urologie (RTUP, RTUTV, PCNL, cystectomie)


Torse

Espace cervical en forme de U

2 x entrée d'air

1 x ruban adhésif

Écran facial fixe

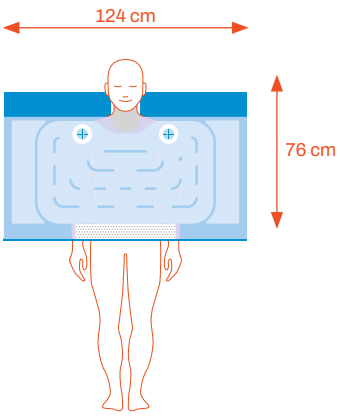

Plus
MA2270



péri

Idéale pour les procédures sur le bas du corps et les membres inférieurs (bras le long du corps) :

Orthopédie (membres inférieurs, ROFI, DHS, IMHS)

Chirurgie générale (hernie, appendicectomie, laparoscopique)

Gynécologie

Urologie (RTUP, RTUTV, PCNL, cystectomie)

Couvertures Matelas Mistral-Air®


Matelas complet

4 x entrées d'air

2 x ruban adhésif
(1 de chaque côté)

Écran facial amovible
(Premium uniquement)

Fentes perforées extra-longues pour passer les bras

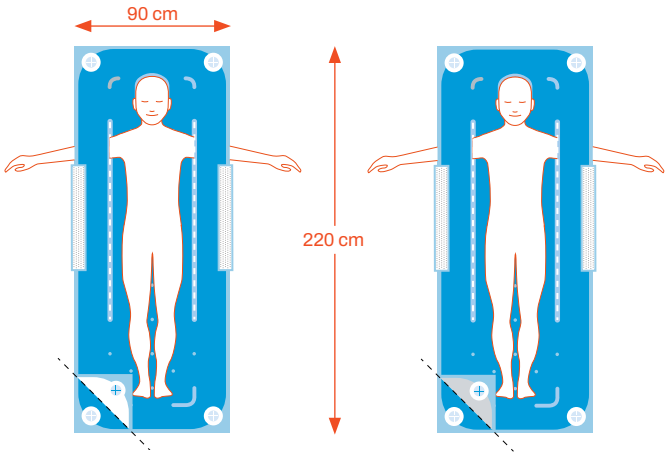

Plus
MA2400

Premium
MA3400



pré **péri** **post**

Notre couverture la plus flexible. Idéale pour :

Orthopédie

Chirurgie cardiaque : PAC, remplacement de valve, PCP

Liposuccion

Chirurgie générale : ouverte et laparoscopique

Chirurgie robotique

Chirurgie thoracique


Demi matelas

2 x entrée d'air

2 x ruban adhésif
(1 de chaque côté)

Écran facial amovible
(Premium uniquement)

Fentes perforées pour passer les bras

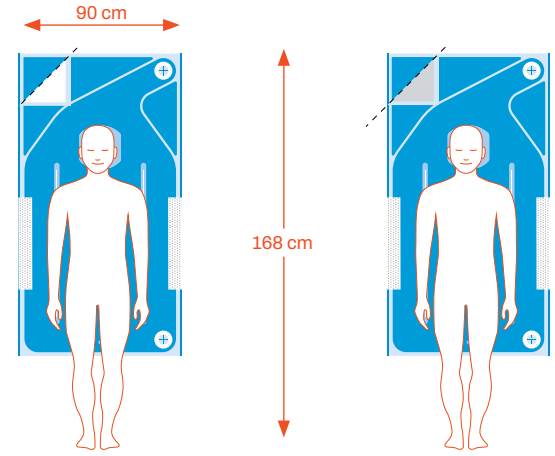

Plus
MA2450

Premium
MA3450



pré **péri** **post**

Idéale pour les procédures sur le bas du corps et à accès complet :

Orthopédie (ROFI du bassin)

Gynécologie (hystérectomies, résection vulvaire, laparoscopique)

Urologie (RTUP, RTUTV, PCNL, prostatectomie radicale, cystectomie)

Chirurgie robotique


Couvertures Matelas Mistral-Air®

Matelas pédiatrique (>1 an)

2 x entrée d'air

Écran facial amovible

Positionnement multifonction : peut être pivoté pour disposer les entrées d'air d'un côté ou de l'autre

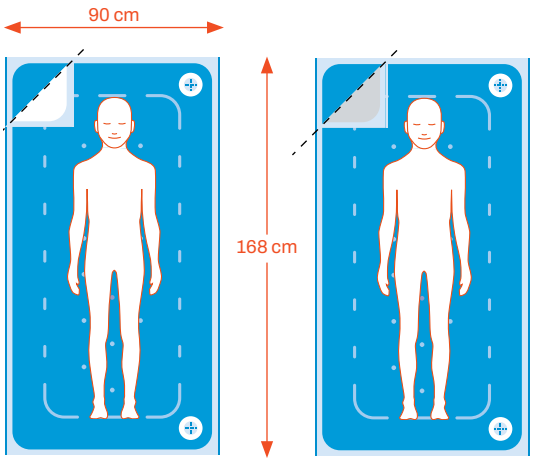

Plus
MA2475

Premium
MA3475



pré **péri** **post**

Idéal pour un accès complet aux patients pédiatriques :

Orthopédie (arthroscopie des membres inférieurs, ostéotomie fémorale)

Cardiologie (cœur ouvert, PCP)


Général (hernie, appendicectomie, laparoscopique, robotique)

Néonatal (<1 an)

2 x entrée d'air

Écran facial amovible

Positionnement multifonction unique : peut être utilisée comme matelas et comme couverture pour couvrir les patients pédiatriques

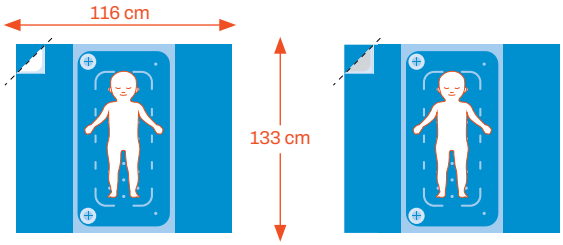

Plus
MA2240

Premium
MA3340



pré **péri** **post**

Idéale pour la chirurgie néonatale :

Anomalies congénitales

Hernie

Cardiaque

Fistule

Récupération


Lithotomie

2 x entrée d'air

Fentes perforées pour passer les bras

Une sangle de chaque côté pour fixer la couverture à la jambe

Couverture de jambe unique qui réduit la perte de chaleur sur le haut de la jambe

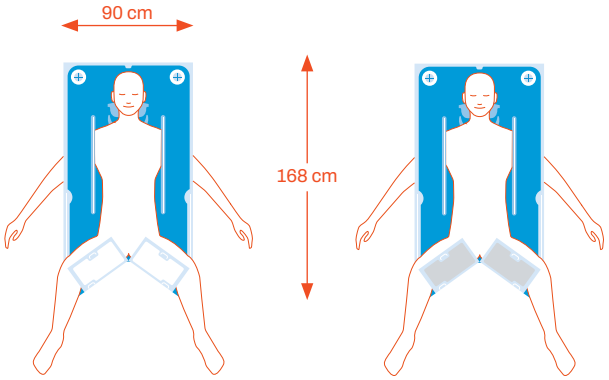

Plus
MA2455

Premium
MA3455



Idéale pour les procédures gynécologiques et urologiques :

Orthopédie (ROFI du bassin)

Gynécologie (hystérectomie vaginale, résection vulvaire, vagino-plastie, prolapsus, hystéroscopie)


Chirurgie robotique

Urologie (RTUP, RTUTV, PCNL, prostatectomie radicale, cystectomie)

Tube

1 x entrée d'air

Peut être utilisé dans différents environnements

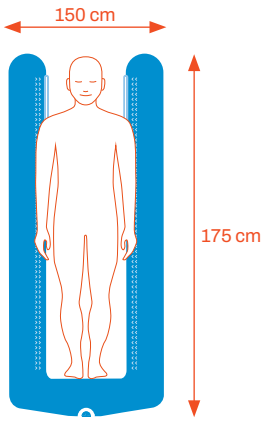

MA0510



Lorsqu'il n'est pas possible de couvrir le corps entier, notre Tube est idéal pour un accès total sans restriction :

Laboratoire de cathétérisme

Procédures dans lesquelles la mise en place de la couverture est difficile.

Utilisation idéale en combinaison avec la couverture passive réfléchissante Thermoflect®

Couvertures spécialisées Mistral-Air®

Accès chirurgical (Stérile et Non-stérile)

2 x entrée d'air

Rabats intégrés pour une fixation optimale de la couverture


4 x ruban adhésif pour fixer la fenêtre d'accès chirurgicale au patient

Fenêtre d'accès chirurgical (53 x 41 cm)

Écran facial fixe

Se positionne aisément dans le champ stérile

Les chirurgiens peuvent aisément agrandir le champ chirurgical jusqu'à 70 cm

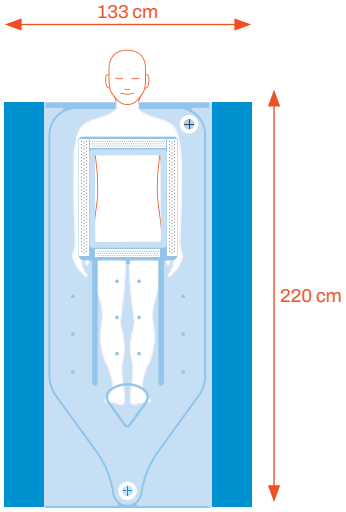

Stérile
MA2280

Non-stérile
MA2290



Idéal pour les procédures critiques du haut du corps :

Orthopédie (spinale)

Transplantations (rein, foie, intestin)

Résections hépatiques

Thoracique (lobectomie, bullectomie, pneumonectomie)

Gynécologie (hystérectomie abdominale)

Urologie (néphrectomie, prostatectomie radicale)

Chirurgie robotique

Accès chirurgical bas (stérile)


1 x entrée d'air

4 x ruban adhésif pour fixer la fenêtre d'accès chirurgicale au patient

Rabats intégrés pour une fixation optimale de la couverture

Fenêtre d'accès chirurgical (40 x 16 cm)

Se positionne aisément dans le champ stérile. La fenêtre transparente d'accès inguinal/fémoral permet un accès aisé à l'artère fémorale

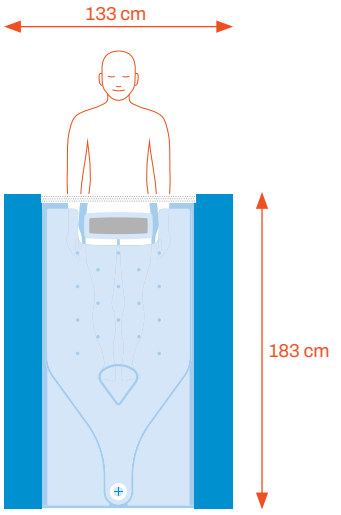

Stérile
MA2285



Idéale pour les procédures critiques sur le haut du corps :

Cardiaque (PAC, remplacement de la valve mitrale/aortique, procédures PCP AATA, chirurgie aortique thoracique, thrombectomie pulmonaire)

Cardiaque (stérile)


1 x entrée d'air (rallonge de tube stérile)

4 x ruban adhésif pour fixer la fenêtre d'accès chirurgicale au patient

Le ruban adhésif maintient la fenêtre d'accès chirurgicale sur le patient

Fenêtre d'accès chirurgical (40 x 16 cm)

Se positionne aisément dans le champ stérile. Le tube de 3 pieds (91 cm) préfixé permet d'installer l'unité de réchauffement en dehors du champ stérile

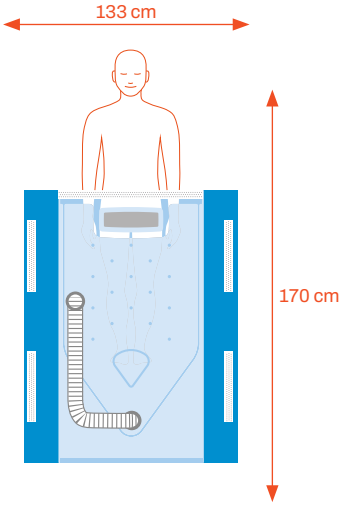

Stérile
MA2286



Conçu pour les procédures cardiaques :


Cardiaque (PAC, remplacement de la valve mitrale/aortique, procédures PCP AATA, chirurgie aortique thoracique, thrombectomie pulmonaire)

Combinaisons chauffantes Mistral-Air® : 3 solutions en une

La combinaison chauffante Mistral-Air® s'utilise idéalement dans les chirurgies à haut risque d'hypothermie, telles que les transplantations d'organe et les chirurgies hépatiques et robotiques.

La combinaison maintient l'intégralité du corps du patient au chaud, pour qu'il ne refroidisse pas avant, pendant ni après une intervention chirurgicale.

3-en-1 :
1. Blouse d'hôpital
2. Couverture haut et/ou bas du corps
3. Couvertures en coton supplémentaires

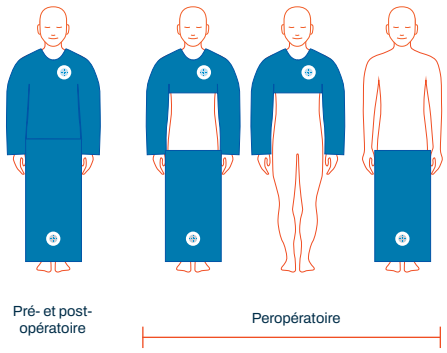

Fonctionnalités supplémentaires :

La fixation Velcro réglable permet d'ouvrir et de refermer aisément la combinaison pour faire passer des câbles ECG par exemple

Accès complet au dos pour les procédures telles que la ponction lombaire

Les manches sont aisément amovibles pour faire passer les lignes de perfusion et le tensiomètre

Le tissu doux non tissé est associé au matériau réfléchissant Thermoflect® qui isole efficacement

Également disponible en version Premium (réfléchissante)

Liste et détails des produits

	RÉF	Taille (mm)	Surface réchauffement (mm)	Poids (g)	Entrée(s) d'air	Écran facial	Ruban adhé Sur la largeur	Sur
Couvertures chauffantes Mistral-Air®								
Plus Adulte	MA2220	2 270 x 1 330	1 730 x 790	180	1			
Plus Pédiatrique	MA2230	1 660 x 1 330	790 x 1 010	131	1			
Plus Néonatale	MA2240	1 160 x 1 330	1 080 x 570	126	2	Amovible		
Plus Bas du corps	MA2250	1 320 x 1 330	945 x 790	115	1		1	
Plus Haut du corps	MA2260	2 010 x 760	1 880 x 580	110	2	Fixe	1	
Plus Demi haut de corps	MA2265	1 600 x 760	1 375 x 580	98	2	Fixe	1 par côté	
Plus Torse	MA2270	1 240 x 760	900 x 530	78	2	Fixe	1	
Premium Adulte	MA3320	2 270 x 1 330	1 730 x 790	198	2			
Premium Pédiatrique	MA3330	1 660 x 1 330	790 x 1 010	144	1			
Premium Néonatale	MA3340	1 160 x 1 330	1 080 x 570	132	2	Amovible		
Premium Bas du corps	MA3350	1 320 x 1 330	945 x 790	124	1		1	
Premium Haut du corps	MA3360	2 010 x 760	1 880 x 580	120	2	Fixe	1	
Premium Demi haut de corps	MA3365	1 600 x 760	1 375 x 580	109	2	Fixe	1 par côté	
Couvertures Matelas Mistral-Air®								
Matelas complet Plus	MA2400	2 200 x 900	2 160 x 840	184	4			1
Plus Demi matelas	MA2450	1 680 x 900	1 020 x 840	141	2			1
Plus Lithotomie	MA2455	1 675 x 900	1 200 x 840	129	2			
Plus Matelas pédiatrique	MA2475	1 680 x 900	1 630 x 840	133	2	Amovible		
Plus Néonatale	MA2240	1 160 x 1 330	1 080 x 570	126	2	Amovible		
Premium Matelas complet	MA3400	2 200 x 900	2 160 x 840	219	4	Amovible		1
Premium Demi matelas	MA3450	1 680 x 900	1 020 x 840	168	2	Amovible		1
Premium Lithotomie	MA3455	1 675 x 900	1 200 x 840	140	2			
Premium Matelas pédiatrique	MA3475	1 680 x 900	1 630 x 840	163	2	Amovible		
Premium Néonatale	MA3340	1 160 x 1 330	1 080 x 570	132	2	Amovible		
Couvertures spécialisées Mistral-Air®								
Plus Accès chirurgical bas stérile	MA2285	1 830 x 1 330	890 x 840	174	1		1	1
Plus Accès chirurgical stérile	MA2280	2 200 x 1 330	1 297 x 840	203	2	Fixe	4 dans l'accès chirurgical	
Plus Accès chirurgical	MA2290	2 200 x 1 330	1 297 x 840	194	2	Fixe	4 dans l'accès chirurgical	
Plus Couverture cardiaque stérile	MA2286	1 700 x 1 330	745 x 840	410	1		1	
Tube	MA0510	1 750 x 150	170 x 150	65	1			

sif la longueur	Couvertures par boîte (pcs)
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
par côté	40 pcs
par côté	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
par côté	40 pcs
par côté	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
	40 pcs
par côté	20 pcs
	20 pcs
	20 pcs
	10 pcs
	100 pcs

	RÉF	Taille du patient (cm)	Entrée(s) d'air
Combinaisons chauffantes Mistral-Air® (Boîte - 10 pcs)			
Combinaison chauffante Mistral-Air®, S	MA1710	≤ 165	2, 1 sur la partie supérieure et 1 sur la partie inférieure
Combinaison chauffante Mistral-Air®, M/L	MA1720	165-195	
Combinaison chauffante Mistral-Air®, XL	MA1740	≥ 195	
Combinaison chauffante Premium Mistral-Air®, M	MA1620	165-180	
Combinaison chauffante Premium Mistral-Air®, L	MA1630	180-195	
Unités de réchauffement et accessoires Mistral-Air® MA1400			
Unité de réchauffement à air pulsé Mistral-Air® MA1400 (220-240 V)	MA1400-230		
Unité de réchauffement à air pulsé Mistral-Air® MA1400 (110-120 V)	MA1400-115		
Empattement Mistral-Air® MA1400	MA1410		
Filtre HEPA Mistral-Air® MA1400	MA1401		
Clamp pour tuyau avec fil Mistral-Air®	MA1020		
Clamp pour tuyau Mistral-Air®	MA5001		
Tuyau Mistral-Air® 1,8 m	MA1018		
Tuyau XL Mistral-Air® (3 m)	MA1018-XL		



	Numéro de référence	Réf. Quick-Connect
Unités de réchauffement et accessoires Mistral-Air® MA1200		
Unité de réchauffement à air pulsé Mistral-Air® 1200 (220-240 V)	MA1200-EU	MA1200-QC-EU
Unité de réchauffement à air pulsé Mistral-Air® 1200 (110-120 V)	MA1200-US	MA1200-QC-US
Potence ajustable Mistral-Air® MA1200 avec corbeille	MA5250	
Pièces de montage Mistral-Air® MA1200	MA5002	
Clamp pour tuyau Mistral-Air®	MA5001	
Potence ajustable Mistral-Air® avec corbeille	MA5250	
Mistral-Air® MA1200 - Filtre (TSCI0017)	MA1200-1001	
Tuyau Mistral-Air® (1,8 m)	MA1018	MA1018-QC
Tuyau XL Mistral-Air® (3 m)	MA1018-XL	MA1018XL-QC



Pour plus d'informations, scannez le code QR

Innovation with purpose

M0167-01-0726-fr

TSC LIFE

Innovation with purpose

Références

1. TSC Life. Mistral-Air® MA1400-230 / MA1400-115 Manuel d'utilisation : Système de réchauffement à air pulsé. 2026.
2. Sharma M et al. BJA 2015;115(Issue eLetters Suppl). doi:10.1093/bja/el_12925.
3. Sessler DI. Todd MM (Éditeur). Anesthesiology 2000;92(2):578–96. doi:10.1097/00000542-200002000-00042.
4. 3M Health Care. Bair Hugger Temperature Management Unit Model 775. 2013.
5. Cincinnati Sub-Zero Products, LLC. WarmAir Operation and Technical Manual: Model 135 Warming Unit. 2018.
6. Comité européen de normalisation. EN 1822-1:2019. Filtres à air à haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) – Partie 1 : Classification, essais de performance, marquage. Bruxelles :
7. Document interne : DMT Test Report No. APS 2 00 056 17.1, par DMT GmbH & Co. KG, Allemagne. 2000 hours Filter Service Alarm.
8. Bair Hugger Service Manual, Bair Hugger Model 775 Warming Unit. 19 th ed. Eden Prairie, MN: 3M Health Care; p. 19. & Cincinnati Sub Zero Warmair Model 135 Manual. 4th ed. Cincinnati, OH: Cincinnati Sub Zero Products, Inc.; p. 17.
9. Bergroth L. Quality Initiative Collaborative Leads to Reduction in Linen Usage and Overall Cost Savings.

Nos équipements médicaux sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé exclusivement. Les professionnels de santé sont tenus d'exercer leur propre jugement clinique professionnel pour déterminer le caractère adapté d'un produit donné dans le cadre du traitement d'un patient individuel. TSC Life ne dispense pas de conseils médicaux et recommande fortement aux professionnels de santé de suivre une formation sur l'utilisation d'un produit avant de l'utiliser. Les professionnels de santé doivent systématiquement consulter la notice, l'étiquette du produit et/ou le mode d'emploi, y compris les instructions relatives au nettoyage et à la stérilisation (le cas échéant), avant d'utiliser un produit fourni par TSC Life. Les informations fournies visent à présenter des produits spécifiques et la gamme étendue d'offres de TSC Life. La disponibilité des produits peut varier d'un marché à l'autre en raison de pratiques règlementaires et/ou médicales propres à chaque région. Pour toute demande relative à la disponibilité des produits TSC Life dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant TSC Life.

TSC Life
Fabriqué par : The Surgical Company International B.V. | Bedrijvenpark Twente Noord 48 | 7602 KR Almelo | Pays-Bas
T : +31 20 790 2100 | letsconnect@tsc-life.com | www.tsc-life.com